


dexcomG6

ROZPOCZNIJ TUTAJ

Konfiguracja

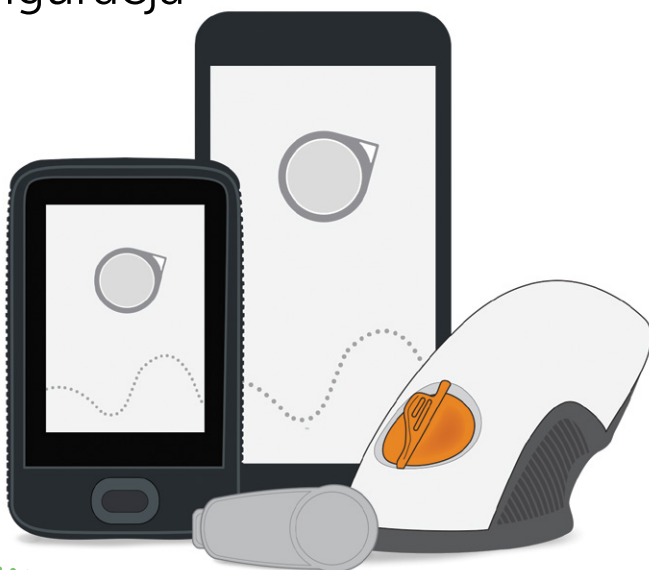

Instrukcje użytkownika

Dexcom G6 CGM (G6) Omówienie

Urządzenie wyświetlające

- Pokazuje informacje dotyczące poziomu glukozy
- Skonfiguruj swoje urządzenie inteligentne, odbiornik Dexcom lub oba urządzenia
- Aktualna lista kompatybilnych inteligentnych urządzeń i systemów operacyjnych znajduje się na stronie: dexcom.com/compatibility
- Aplikacja i odbiornik G6 są zgodne ze wszystkimi systemami G6

Twoje inteligentne urządzenie




Odbiornik Dexcom




Aplikator z wbudowanym czujnikiem

- Aplikator czujnika wprowadza czujnik pod skórę
- Czujnik odczytuje informacje dotyczące poziomu glukozy

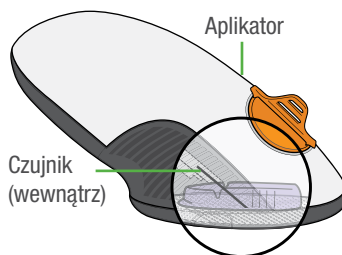

Nadajnik

- Przesyła informacje o poziomie glukozy z czujnika do urządzenia wyświetlającego

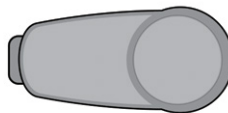

Wszystkie materiały graficzne pełnią funkcję reprezentacyjną. Produkt może w rzeczywistości wyglądać inaczej.

Przed użyciem systemu G6 zapoznaj się z Oświadczeniem dotyczącym bezpieczeństwa znajdującym się w części *Używanie systemu G6, Rozdział 2*.

Jak działa?

System G6 przesyła odczyty poziomu glukozy z czujnika systemu G6 (odczyty na podstawie systemu G6) do urządzenia wyświetlającego.



Wybierz aplikację, odbiornik lub obie opcje

Odbiornik jest dedykowanym urządzeniem medycznym. Natomiast Twoje urządzenie inteligentne nie jest, mimo że można uruchomić na nim aplikację G6. Twoje urządzenie inteligentne nie jest urządzeniem medycznym, ponieważ aplikacja może pominąć alarm/ostrzeżenie tylko dlatego, że zostały wyemitowane na urządzeniu inteligentnym – na przykład z powodu ustawień urządzenia inteligentnego, wyłączenia się urządzenia inteligentnego lub aplikacji, niskiego stanu baterii itp.

Skorzystaj z kart poniżej, aby skonfigurować aplikację, odbiornik lub obie opcje

Czy chcesz skonfigurować oba urządzenia? Wybierz, które z nich chcesz skonfigurować jako pierwsze i przejdź do odpowiedniej karty. W ostatnim kroku pokazano, w jaki sposób należy skonfigurować drugie urządzenie wyświetlające. Nie należy używać obu kart.

Aby poznać inne sposoby konfiguracji systemu G6:


- Samouczek znajduje się na stronie dexcom.com/downloadsandguides
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Dexcom




Twoje urządzenie inteligentne




Odbiornik Dexcom

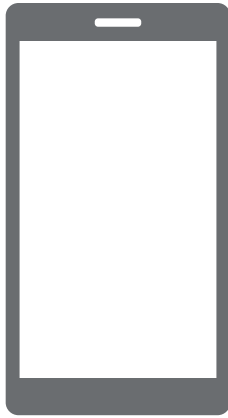

Twoje urządzenie inteligentne

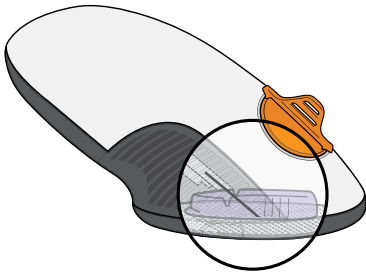

Aplikator z wbudowanym czujnikiem

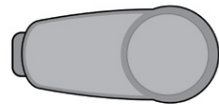

Nadajnik

Skonfiguruj aplikację

Krok 1: Skonfiguruj aplikację


A Pobierz i otwórz aplikację Dexcom G6




B Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji na ekranie

1 Po wyświetleniu polecenia:

- Prześlij swoje dane do chmury. Pozwala to na skorzystanie z funkcji:
 - Share: Przesyłaj dane uzyskane na podstawie systemu G6 do obserwatorów.
 - CLARITY: Analizuj dane razem z lekarzami; obserwuj wzorce (funkcja może nie być dostępna w każdym regionie).
- Wprowadź kod czujnika (znajduje się na aplikatorze czujnika, który wprowadzisz).
- Brak kodu czujnika?
Patrz Używanie systemu G6, Załącznik A Diagnostyka problemów.

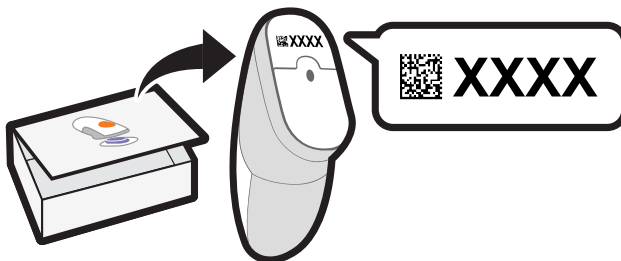

- Wprowadź numer seryjny (SN) znajdujący się na:

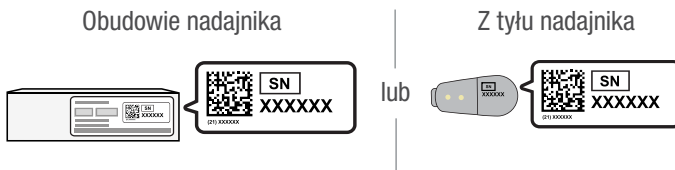

Po wprowadzeniu numeru seryjnego system G6 wyszuka nadajnik. Podczas wyszukiwania nie otrzymasz odczytów G6 ani alarmów/ostrzeżeń.

- 2** Czy widzisz niebieski kolor stopera rozruchu czujnika? Oznacza to, że czujnik przyzwyczajają się do pracy w Twoim ciele.


Podczas rozruchu:

- Brak odczytów G6 lub alarmów/ostrzeżeń
- Urządzenie inteligentne musi zawsze znajdować się w odległości nie większej niż 6 metrów od nadajnika



C Odczekaj 2 godziny


- Po zakończeniu fazy rozruchu czujnika dotknij przycisku **OK**, aby wrócić do ekranu głównego
- Teraz możesz uzyskać odczyty G6 i alarmy/ostrzeżenia

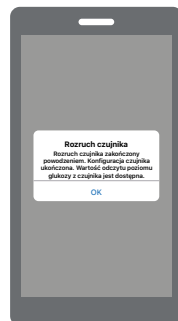

Krok 2: Patrz *Używanie systemu G6*

Dowiedz się, jak:

- Odczytać ekran główny
- Korzystać z alarmów i ostrzeżeń
- Podejmować decyzje dotyczące leczenia
- Diagnozować problemy

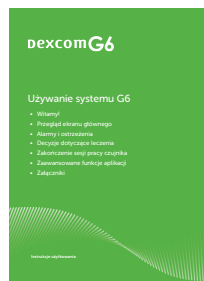


Krok 3: Opcjonalny — Skonfiguruj odbiornik


Włącz odbiornik, naciskając przycisk zasilania przez 2–3 sekundy. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Nie należy korzystać z karty Skonfiguruj odbiornik. Opisane w niej kroki dotyczą konfiguracji odbiornika przed konfiguracją aplikacji.




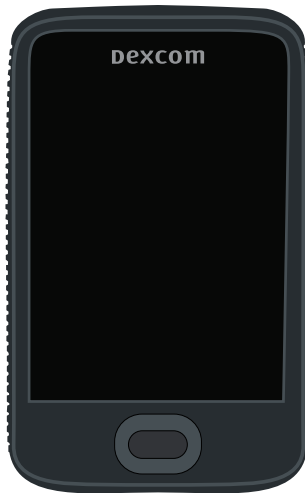

Odbiornik

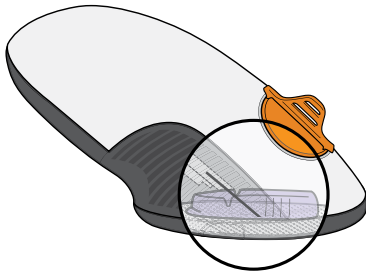

Aplikator z wbudowanym
czujnikiem

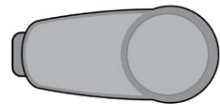

Nadajnik

Skonfiguruj odbiornik

Krok 1: Skonfiguruj odbiornik

A Wyjmij odbiornik z obudowy




B Włącz odbiornik

Wciskaj przycisk zasilania przez 2–3 sekundy.



C Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

- 1 Po wyświetleniu polecenia wprowadź:
 - Kod czujnika znajduje się na aplikatorze czujnika, który wprowadzisz
 - Brak kodu czujnika?
Patrz *Używanie systemu G6, Załącznik A Diagnostyka problemów*

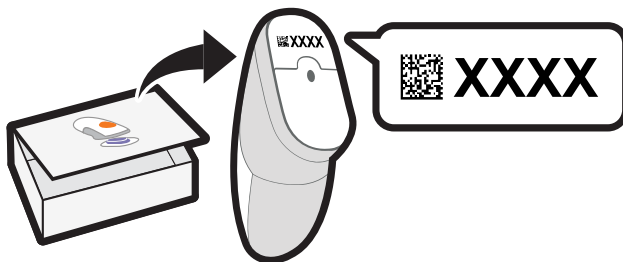

- Numer seryjny (SN) znajdujący się na:

Obudowie nadajnika




lub

Z tyłu nadajnika



Po wprowadzeniu numeru seryjnego system G6 wyszuka nadajnik. Podczas wyszukiwania nie otrzymasz odczytów G6 ani alarmów/ostrzeżeń.


- 2** Ten krok zostanie zakończony, kiedy wyświetli się ekran:

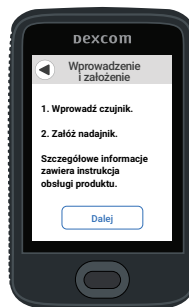

Krok 2: Użyj aplikatora, aby wprowadzić wbudowany czujnik

A Wyjmij aplikator z wbudowanym czujnikiem z obudowy czujnika

Zbierz materiały: aplikator (z wprowadzonym kodem), nadajnik i chusteczki.

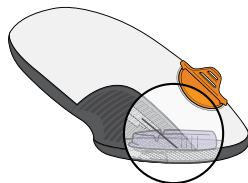

B Wybierz miejsce założenia czujnika

Pacjenci w wieku 2 lat i starsi

LUB


Tylko pacjenci w wieku 2–17 lat




Unikaj kości, podrażnionej skóry, tatuaży i miejsc narażonych na uderzenia.

C Użyj aplikatora, aby wprowadzić wbudowany czujnik


1 Przygotuj aplikator i chusteczkę nasączoną alkoholem.

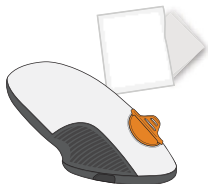


2 Umyj i osusz ręce.

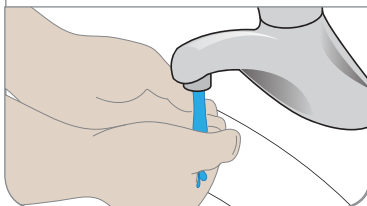


3 Oczyszczyć miejsce założenia czujnika chusteczką nasączoną alkoholem.

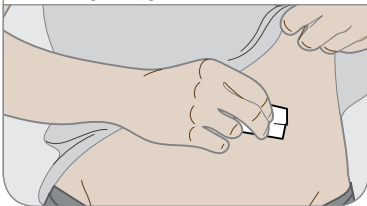


4 Zdejmij podkłady samoprzylepne. Nie dotykaj plastra samoprzylepnego.

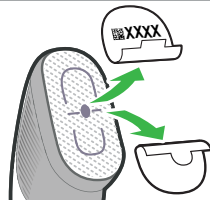


5 Umieść aplikator na skórze.

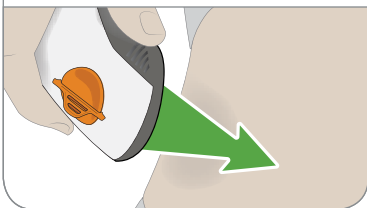


6 Pociągnij i wyłam blokadę zabezpieczającą.

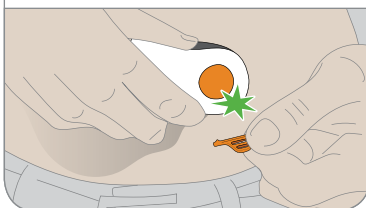


7 Wciśnij przycisk, aby rozpocząć procedurę wprowadzania czujnika.

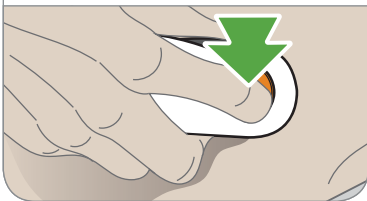

8 Zdejmij aplikator ze skóry, pozostawiając plaster i uchwyt.

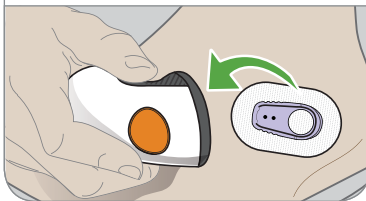


9 Wyrzucić aplikator. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi elementów mających styczność z krwią.

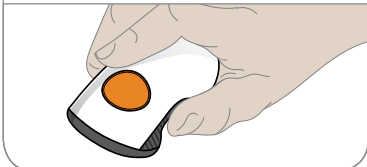


Krok 3: Załóż nadajnik

A Wyjmij nadajnik z obudowy

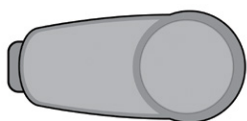


B Zatrzaśnij nadajnik w odpowiednim miejscu


1 Oczyszczyć nadajnik chusteczką nasączoną alkoholem.

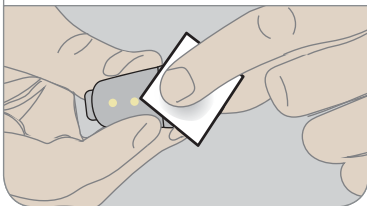


2 Włóż nadajnik kartą do przodu do uchwytu.

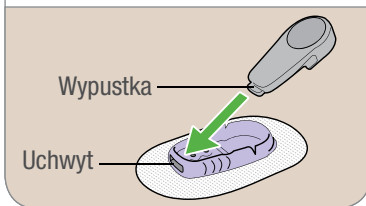

3 Zatrzaśnij nadajnik w odpowiednim miejscu, aż wskoczy na swoje miejsce. Upewnij się, że leży płasko i jest dobrze dopasowany do uchwytu.

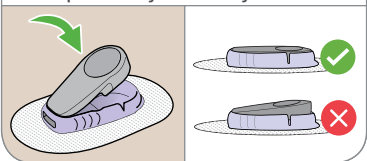

4 Potrzyj plaster samoprzylepny 3 razy na całej powierzchni.

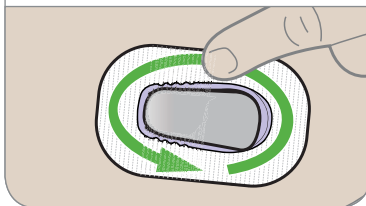

Krok 4: Uruchom czujnik w odbiorniku

A Odczekaj do 30 minut – tyle może zająć łączenie urządzeń

Podczas parowania:

- Brak odczytów G6 lub alarmów/ostrzeżeń
- Odbiornik musi zawsze znajdować się w odległości nie większej niż 6 metrów od nadajnika



B Dotknij przycisku Aktywuj czujnik, aby rozpocząć rozruch czujnika

Podczas rozruchu nie otrzymasz odczytów G6 ani alarmów/ostrzeżeń



C Poczekaj


- Po zakończeniu dotknij przycisku Dalej, aby przejść do ekranu głównego
- Teraz możesz uzyskać odczyty G6 i alarmy/ostrzeżenia



Krok 5: Patrz *Używanie systemu G6*

Dowiedz się, jak:

- Odczytać ekran główny
- Korzystać z alarmów i ostrzeżeń
- Podejmować decyzje dotyczące leczenia
- Diagnozować problemy

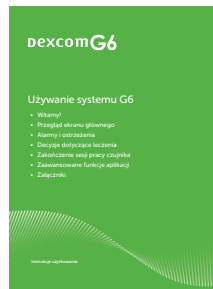

Krok 6: Opcjonalny — Skonfiguruj aplikację

Pobierz aplikację na swoje inteligentne urządzenie i otwórz ją. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Nie należy korzystać z karty Skonfiguruj aplikację. Dotyczy ona konfiguracji aplikacji przed konfiguracją odbiornika.



Dexcom

© 2019 Dexcom, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Objęte patentami dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom Share, Dexcom Care i Dexcom Clarity oraz Share są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Dexcom, Inc. w Stanach Zjednoczonych i mogą nimi być także w innych krajach.

Dexcom



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

+1 858 200 0200
dexcom.com

Poza terytorium Stanów Zjednoczonych:
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Dexcom.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

