

Korzyści, jakie Accu-Chek Combo oferuje lekarzom i ich pacjentom.

System łatwy w obsłudze

- Intuicyjne menu systemu skraca czas szkolenia pacjenta z obsługi urządzeń.

Szybki dostęp do informacji

- Elektroniczny dzienniczek zapewnia dostęp do potrzebnych kluczowych informacji i ułatwia dokonywanie wszelkich zmian.
- Pojemna pamięć i czytelne wykresy umożliwiają szybszą i łatwiejszą interpretację wyników.

Dyskretnie leczenie wspomaga motywację

- Dyskretna obsługa daje pacjentom większą elastyczność.
- Brak przymusu wyjmowania pompy spod ubrania, zachęca do częstego podawania bolusów posiłkowych lub korekcyjnych, zgodnie z zaleceniem lekarza.



ACCUCHEK® Performa Combo



ACCUCHEK® Spirit Combo

Dowiedz się więcej o systemie Accu-Chek Combo – łatwym, szybkim i dyskretnym rozwiązaniu.

Odwiedź stronę www.accu-chek.pl
lub skontaktuj się z przedstawicielem Accu-Chek.



ACCUCHEK, ACCUCHEK AVIVA COMBO oraz ACCUCHEK SPIRIT COMBO są znakami towarowymi firmy Roche. Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi, stanowiącymi własność Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Roche odbywa się na podstawie licencji.

www.accu-chek.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim

ACCUCHEK®

ACCUCHEK® Combo

Roche



Interaktywny system Accu-Chek® Combo

Naciśnij przycisk tu...

... a pompa działa tam.

ACCUCHEK®



Kontrola cukrzycy,
która mieści się w Twojej dłoni.

System Accu-Chek Combo łączy w sobie glukometr oraz pompę insulinową. Zapewnia wszystko, co niezbędne do wszechstronnego, dyskretnego leczenia cukrzycy i mieści się w dłoni.

- **Łączność dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth®** – glukometr umożliwia zdalne sterowanie pompą insulinową.
- **Zsynchronizowany system** – interaktywna dwustronna komunikacja pomiędzy pompą insulinową a glukometrem.
- **Wbudowana funkcja kalkulatora bolusa** – ułatwia obliczenie dawki bolusa dostosowanej do posiłku.
- **Elektroniczny dzienniczek** – przechowuje kluczowe dane pacjenta w jednym urządzeniu.




Accu-Chek Performa Combo –
więcej niż glukometr.



Dokładny pomiar

- Dzięki użyciu sprawdzonych testów paskowych Accu-Chek Performa, pacjenci mogą dokonać pomiaru w ciągu kilku sekund.

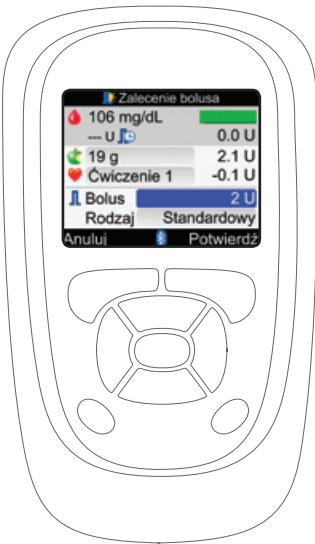

Kalkulator bolusa

- Pozwala pacjentom na obliczenie spersonalizowanej wartości bolusa.
- Spersonalizowana wartość bolusa to wartość obliczona na podstawie danych charakterystycznych dla konkretnego pacjenta, takich jak: pożądaný zakres glikemii, aktualne stężenie glukozy we krwi, wartość posiłku, a także planowany wysiłek fizyczny, choroba czy stres. Kalkulator bolusa uwzględnia aktywną insulinę.


- Służy minimalizacji ryzyka wystąpienia hiperglikemii poposiłkowej.



Dyskretna kontrola działania pompy

- Kontrola pompy insulinowej za pomocą glukometru dzięki technologii komunikacji bezprzewodowej Bluetooth®.
- Programowanie wszystkich podstawowych funkcji pompy (np. dawka podstawowa, baza tymczasowa) bez potrzeby wyjmowania pompy spod ubrania: ekran pompy insulinowej jest po prostu widoczny na wyświetlaczu glukometru trzymanego w dłoni.

- Glukometr przypomina o potrzebie wymiany zestawu infuzyjnego, czy też o kolejnej wizycie kontrolnej.

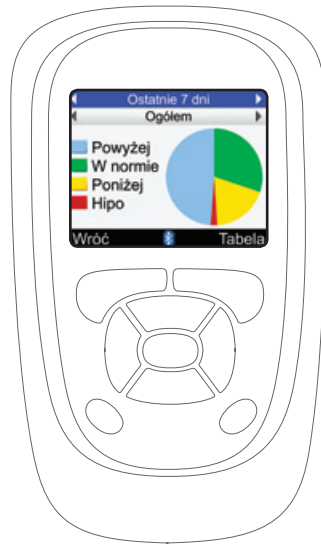

Więcej danych to pełniejszy obraz

- Zintegrowany elektroniczny dzienniczek przechowuje wartości stężenia glukozy we krwi, dawki insuliny oraz wielkości spożytych węglowodanów.
- Kolorowy wyświetlacz umożliwia przedstawienie danych odnośnie glikemii w postaci czytelnych wykresów.
- Dane przedstawione w zrozumiały sposób motywują pacjenta do osiągnięcia najlepszych wyników samokontroli.

Accu-CHEK® Combo



Accu-Chek Spirit Combo –
pompa, która działa
pod przykryciem.

Kontrola w dłoni

- Po umieszczeniu pompy insulinowej pod ubraniem, pacjent nie musi jej dotykać w celu podania bolusa lub sprawdzenia komunikatów na wyświetlaczu.

Ścisłe naśladowanie fizjologicznego działania trzustki

- Godzinowa dawka insuliny jest dzielona na 20 części podawanych co 3 minuty co naśladuje fizjologiczne działanie trzustki.

Teraz jeszcze lepsza!

- Minimalna godzinowa dawka podstawowa równa 0,05 jedn., z przyrostem o 0,01 jedn. – zaprojektowana specjalnie dla osób z małym zapotrzebowaniem na całkowitą dzienną dawkę insuliny.
- Szybkie wykrywanie zatorów w cewniku zestawu infuzyjnego.
- Nieograniczony czas pracy urządzenia.
- Możliwość zastosowania baterii litowej, o dłuższym czasie działania.

Ta pompa dostarcza 0,0025 jedn.
co 3 minuty (20 dawek na godzinę).*

*Przy zaprogramowanej dawce godzinowej 0,05 jedn.